

GUIA COMPLETO DE MATERIAIS DE COLETA

Armazenar suas amostras corretamente **faz toda a diferença** na qualidade dos seus exames. Precisamos entender que para que uma análise seja realizada da melhor maneira, antes de qualquer coisa, **a amostra precisa ser bem coletada e bem armazenada**. Para isso, usamos diversos **tubos e frascos** a fim de conservar todos os tipos de amostras e garantir resultados seguros e fidedignos. Confira nos exemplos abaixo quais tubos são utilizados para armazenadas as amostras mais utilizadas na nossa rotina!



EDTA

Hematologia



Tubo seco ou com gel

Bioquímicos,
hormônios e
sorologias



Fluoreto

Glicose e
lactato



Swab Seco

Culturas e PCR.
***No caso das
culturas, deve ser
enviado
rapidamente ao
laboratório**



Citrato de Sódio

Fatores de
coagulação



Heparina

Hemograma
de aves e
répteis



Frasco Coletor

Urina e fezes
Com formol:
biopsias



Swab com meio

Cultura
bacteriana e
cultura fúngica
***não pode ser
utilizado para
PCR**



@saocamiloveterinaria




São Camilo Veterinária
LABORATÓRIOS

Acesse nosso **site**



COMO ENVIAR SEUS EXAMES?

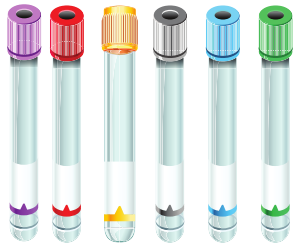

O ideal que os tubos fiquem **refrigerados** até o envio ao laboratório, caso o envio não seja imediato. Lembre-se que **não podemos deixá-los em contato com o gelo ou congelá-los e também não deixá-los expostos ao sol.** Caso você prefira, pode-se **centrifugar as amostras dos tubos vermelho e amarelo** e enviar o soro congelado ao laboratório.



Os swabs com gel **não precisam ser refrigerados** e conservam bem as amostras por até 48h. Após esse período, o ideal é que a amostra fique conservada em geladeira. Os swabs secos devem ser **refrigerados**.



Os frascos com urina devem ser **protegidos da luz e conservados em geladeira**. Os frascos com amostra de fezes devem ser conservados refrigerados e os fracos coletores **com formol e amostras de biopsias** não necessitam de refrigeração, apenas que o formol esteja em contato com todo o fragmento e em quantidade suficiente.



As lâminas devem ser enviadas sempre em **porta lâminas e bem protegidas** para que não sejam quebradas durante o transporte. Recomendamos também que **não se coloque uma lâmina por cima da outra** a fim de evitar que elas se quebrem quando o material for processado.



@saocamiloveterinaria



São Camilo Veterinária
LABORATÓRIOS

Acesse nosso **site**

